



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA






Lead Fine Lift

LFL è un trattamento innovativo per viso e corpo con fili in PDO (Polidioxanone), che vengono assorbiti dopo aver stimolato i fibroblasti aumentando la produzione di collagene e migliorandone il microcircolo locale.

Il filo svolge una doppia funzione, creando un'intensa biostimolazione dei tessuti e fornendo un delicato sostegno/trazione alla struttura ceduta, sia cutanea che connettivale

Apporta effetti naturali ed incisivi al viso ed al corpo dopo un trattamento semplice e sicuro.

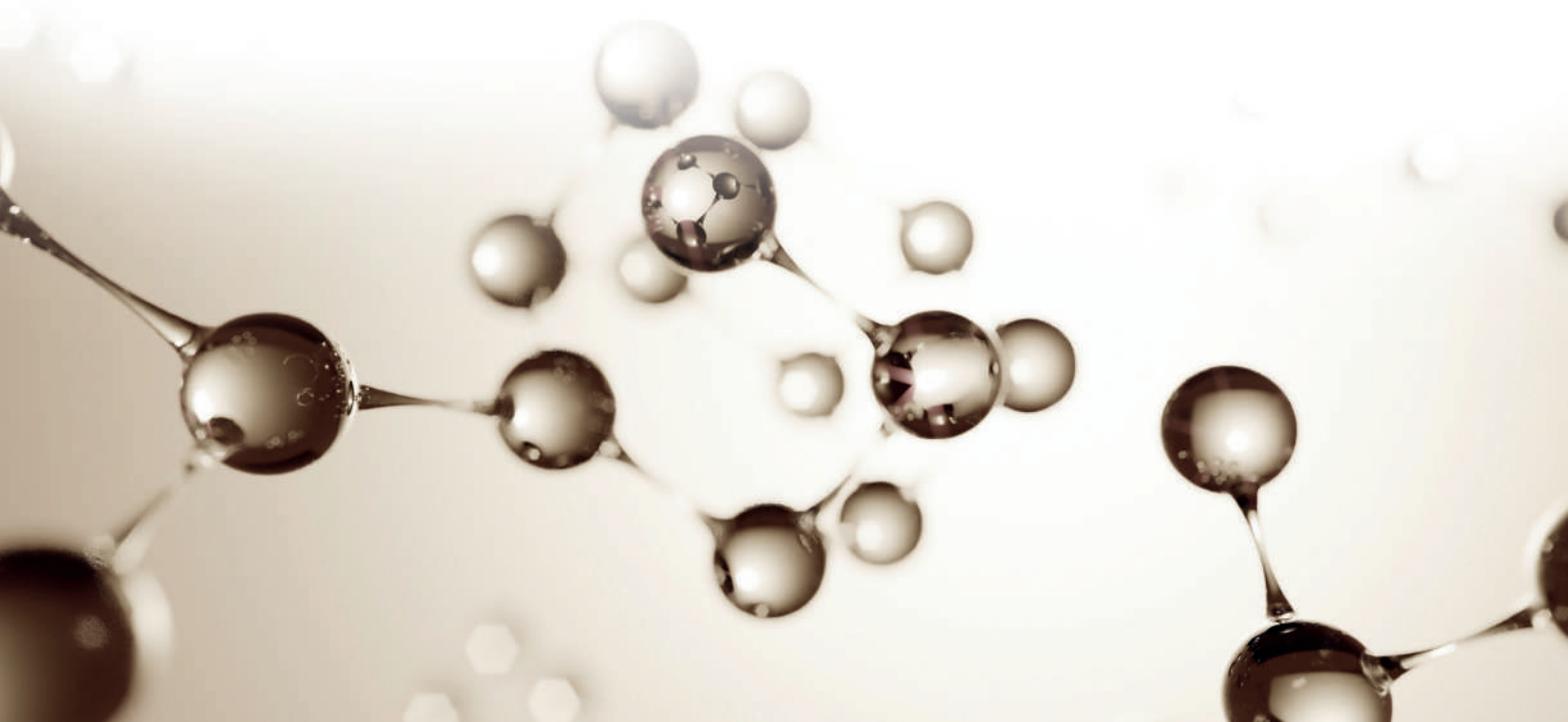



La migliore e più semplice tecnica per il ringiovanimento e lifting della pelle

Benefici

- Effetti immediati
- Trattamento di breve durata
- Minimamente invasivo
- Minimo tempo di inattività

Caratteristiche

- Aghi e cannule ultrafini e di alta qualità
- Fili brevettati e certificati, dispositivo medico di classe III
- Metodo di confezionamento altamente igienico (sacchetto sottovuoto)

Effetti

- Lifting immediato
- Ringiovanimento della pelle
- Tensione e luminosità
- Rimozione delle rughe

Tecnologia

- Aghi ultrafini che permettono di trattare anche vaste aree
- Punte taglienti ottenute tramite speciali tecniche all'avanguardia
- Rivestimenti speciali con minore resistenza permettono all'ago di inserirsi nella pelle dolcemente

Meccanismo

- Produzione del collagene in risposta alla presenza del corpo estraneo (filo in PDO) e la lesione meccanica dell'ago stimolano e migliorano il metabolismo ed il flusso sanguigno nell'area trattata
- Le barbe del filo si ancorano nella pelle e sollevano la pelle naturalmente rilassata

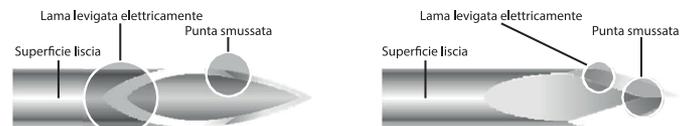
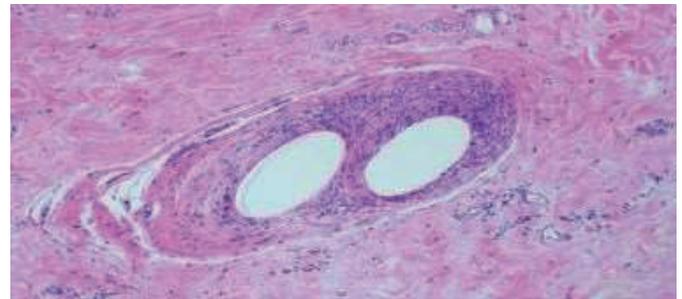


Immagine al microscopio (x230)

LFL

BASIC

PDO

STERILE EO

È il filo più usato per il ringiovanimento della pelle e il rassodamento locale in diverse aree del viso e del corpo



Caratteristiche

- Monofilamento assorbibile
- Ago ultra sottile atraumatico

Effetti

- Riduzione delle rughe sottili
- Rassodamento della pelle ed effetto di ringiovanimento



Packaging

Scatola da 50 pezzi in 2 confezioni da 25, ogni confezione contiene 5 blister da 5



SPECIFICHE TECNICHE

Gauge	Ago		USP
	Lunghezza	Filo Lunghezza	
25G	90mm	150mm	5-0
27G	60mm	90mm	5-0
29G	50mm	70mm	6-0
29G	40mm	50mm	6-0
31G	30mm	30mm	7-0

LFL

SCREW

PDO

STERILE EO

Sutura a forma di spirale da utilizzare per un rassodamento ed un riempimento localizzato



Caratteristiche

- Monofilamento a forma di spirale


Effetti

- Rassodamento locale e volumizzante
- Più efficace per sollevamento delle sopracciglia
- Correzione del doppio mento



Packaging

Scatola da 50 pezzi in 2 confezioni da 25, ogni confezione contiene 5 blister da 5

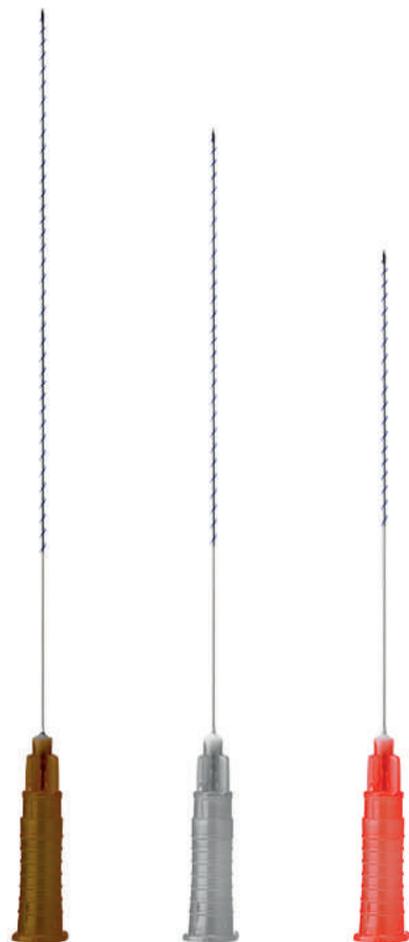

26G / 60mm

27G / 50mm

29G / 40mm

SPECIFICHE TECNICHE

Ago		Filo	
Misura	Lunghezza	Lunghezza	USP
26G	60mm	90mm	5-0
27G	50mm	70mm	5-0
29G	40mm	52mm	6-0



DOUBLE SCREW

PDO

STERILE EO

Versione migliorata con doppia filettatura.



Caratteristiche

- Due fili a forma di spirale
- Struttura a spirale durevole


Effetti

- Effetto più forte di Screw



Packaging

Scatola da 50 pezzi in 2 confezioni da 25, ogni confezione contiene 5 blister da 5

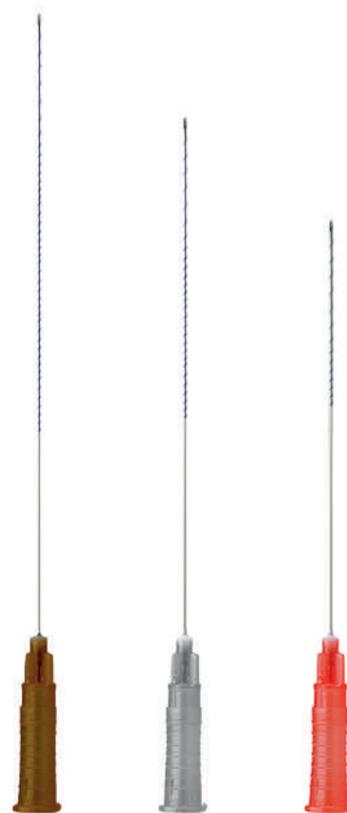

26G / 60mm 27G / 50mm 29G / 40mm

SPECIFICHE TECNICHE

Ago		Filo	
Misura	Lunghezza	Lunghezza	USP
26G	60mm	200mm	7-0*2
27G	50mm	140mm	7-0*2
29G	40mm	106mm	7-0*2

LFL

PEAKO

PDO

STERILE EO

Filo ottimizzato per il rimodellamento del naso senza chirurgia



Caratteristiche

- Non-invasivo, assenza di cicatrici
- Procedura veloce
- Molto più sicura di un impianto
- Possibile creare un'ottima forma del naso che i filler non riescono
- Ottima sinergia in combinazione con filler

Effetti

- Aspetto naturale
- Rimodellamento della punta del naso
- Innalzamento e raddrizzamento del setto nasale



Packaging

Scatola da 12 pezzi in blister singoli



SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	USP
Gauge	Lunghezza	Lunghezza	
19G	60mm	80mm	2
	40mm	50mm	



LFL

BARB II

PDO

STERILE EO

Il Barb II è un filo con spinette bidirezionali montato su ago per un effetto di tensione e redistribuzione dei tessuti del viso



Caratteristiche

- Spinette bidirezionali
- Ago ultra sottile atraumatico


Effetti

- Correzione del contorno del viso
- Rafforzamento e Sollevamento del terzo medio ed inferiore del viso



Packaging

Scatola da 12 pezzi in blister singoli

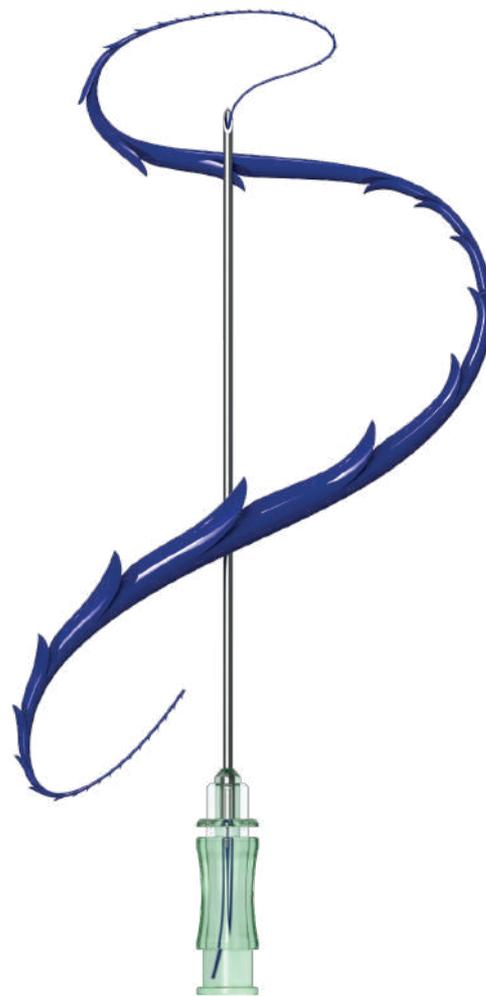

SPECIFICHE TECNICHE

Gauge	Ago		Filo	USP
	Lunghezza	Lunghezza	Lunghezza	
21G	90mm	150mm	3-0	
	60mm	90mm		
23G	90mm	150mm	4-0	
	60mm	90mm		



ANCHOR PLUS HALF



STERILE EO

Il primo filo stampato che può essere inserito in cannule da 21G.



Caratteristiche

- Metodo Press sculpting senza calore
- Ancorette più grandi e forti dei fili 19G/20G con barbette
- Meno dolore e sanguinamento rispetto al filo tagliente 19G/20G
- Le 2 ancorette consecutive garantiscono un effetto di fissaggio e di lifting più forte


Effetti

- Miglioramento delle rughe superficiali e profonde
- **Foxy Eyes**



Packaging

Scatola da 10 pezzi in blister da 2

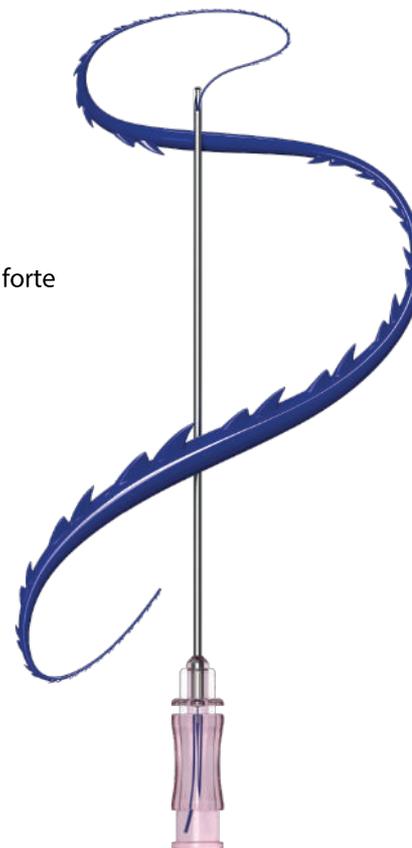

SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	
Gauge	Lunghezza	Lunghezza	USP
21G	60mm	120mm	3-0
	100mm	185mm	



ANCHOR

PDO

STERILE EO

Filo di ultima generazione, evoluzione innovativa della serie dei fili di trazione con barbe



Caratteristiche

- Progettato con tecnologia brevettata per le applicazioni di lifting
- Prodotto con Metodo di Stampaggio (tecnica di non-taglio) per ridurre al minimo i danni al filo
- Resistenza alla trazione ed all'ancoraggio maggiore di quella degli altri fili barb
- Cannula di alta qualità, dalle pareti ultra sottili e punta arrotondata

Effetti

- Garantisce un effetto di trazione ed ancoraggio più forte e duraturo
- Lifting del viso e rimodellamento
- Miglioramento delle rughe sottili e profonde
- Body conouting



Packaging

Scatola da 12 pezzi in blister singoli



SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	USP
Gauge	Lunghezza	Lunghezza	
18G	100mm	185mm	0
	70mm	162mm	
19G	100mm	185mm	2-0
	60mm	162mm	



ANCHOR PLUS

PDO

STERILE EO

Rappresenta la versione di Upgrade di LFL Anchor ed ha 2 ancorette consecutive per un maggiore effetto di trazione ed un miglior risultato di lifting



Caratteristiche

- Le 2 ancorette consecutive garantiscono un fissaggio più forte ed un migliore effetto lifting
- Le piccole ancorette di supporto aiutano quelle più grandi a mantenere l'intera forza di fissaggio
- Ampia gamma di stimolazione


Effetti

- Fissaggio e LIFTING più performanti
- Le piccole spinette garantiscono una stimolazione extra



Packaging

Scatola da 12 pezzi in blister singoli

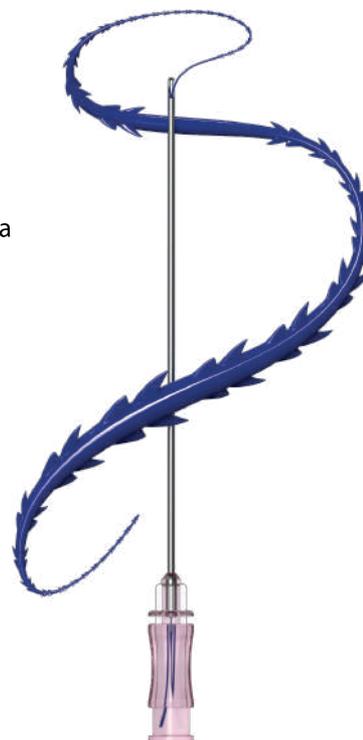

SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	USP
Gauge	Lunghezza	Lunghezza	
18G	100mm	185mm	0
	60mm	162mm	
19G	100mm	185mm	2-0
	60mm	162mm	



ANCHOR X PDO


STERILE EO

● Le ancore multidirezionali a forma di X offrono una straordinaria potenza di lifting

● I conetti inducono una stimolazione aggiuntiva promuovendo una maggiore formazione di collagene


● Anchor X è modellato con un speciale metodo di scultura a pressione senza calore

● Ciascun set di ancore agisce come un unico filo, fornendo un fissaggio eccezionale

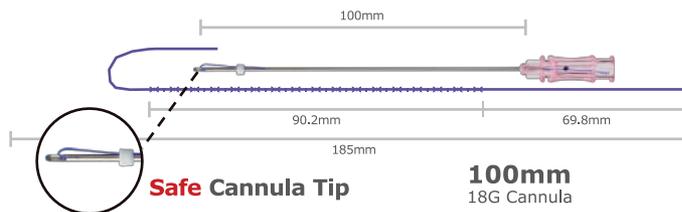

Safe Cannula Tip

100mm
18G Cannula

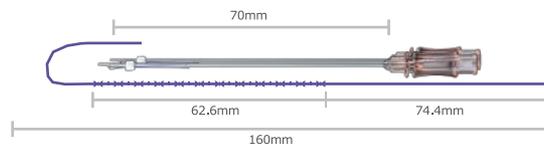

70mm
19G Cannula

SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	USP
Gauge	Lunghezza	Lunghezza	
18G	100mm	185mm	0
	70mm	160mm	
19G	100mm	185mm	2-0
	70mm	160mm	

Packaging

Scatola da 12 pezzi in blister singoli





ANCHOR MAX




STERILE EO

ANCHOR MAX è il filo di trazione in PDO di nuova concezione e di lunga durata che è prodotto con il PRESS SCULPTING METHOD



Caratteristiche

- Le ancorette sono più profonde e forniscono un fissaggio più forte
- La forza di fissaggio è massimizzata dalla nuova forma della punta del filo
- Piccole spine su entrambi i lati stimolano nuova sintesi di collagene
- Sistema di posizionamento del filo più efficace e sicuro

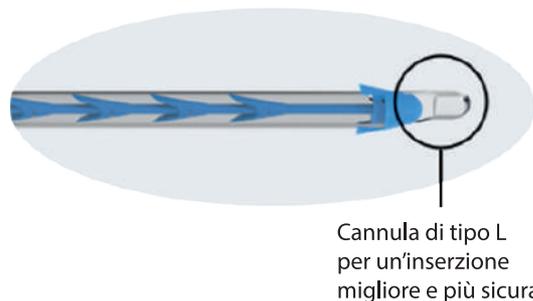

Packaging

Scatola da 10 pezzi in blister da 2

SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	USP
Gauge	Lunghezza	Lunghezza	
17G	100mm	180mm	2-0
17G	70mm	150mm	2-0



ANCHOR DX



STERILE EO

I dispositivi medici Anchor DX sono dei fili di trazione con ancorette stampate a freddo, con lunghezza del filo di 38 cm con all'estremità due aghi affilati e smussati di 12 cm, utilizzati per riposizionare i tessuti del terzo medio del volto, della linea mandibolare, delle sopracciglia e del collo.

Caratteristiche

Double

- Due ancorette consecutive
- Metodo di pressatura senza calore
- Ancorette bidirezionali a forma di freccia
- PDO e PCL

Classic

- USP2: più spesso di qualsiasi altro ago doppio 21G
- Metodo di pressatura senza calore
- Ancorette bidirezionali a forma di freccia
- PDO e PCL


Aghi affilati e smussati

- Introduzione dell'ago più facile e regolare
- Segno scala a 5mm
- Minimo danno ai tessuti e minimi tempi di guarigione




Packaging - Scatola da 4 pezzi in blister da 2

DX DOUBLE

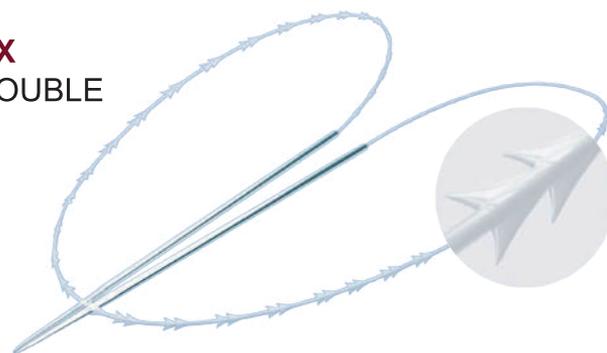

DX CLASSIC

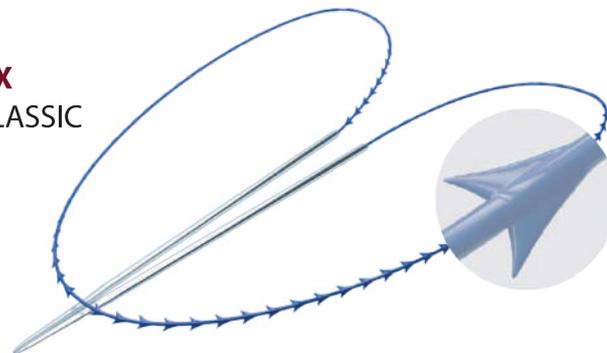

Tipo	Ago affilato-smussato		Filo	
	Misura	Lunghezza	Lunghezza	USP
Classic	21G	120mm	389mm	2
Double	21G	120mm	389mm	1-0

LFL


MESH

PDO

PCL

STERILE EO

LFL Mesh è progettato per modellare e migliorare i volumi del paziente

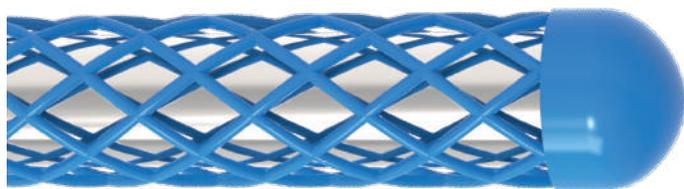

Caratteristiche ed effetti

- Struttura a 16 linee che ottimizza l'effetto volumetrico
- La maglia stretta trattiene il filler all'interno della struttura e ne mantiene la forma
- La punta smussata riduce al minimo i rischi dell'inserzione
- Qualsiasi tipo di filler può essere collegato alla Cannula del Mesh




Packaging - Scatola da 10 pezzi in blister da 2



Struttura a maglia stretta

Questa struttura mantiene il riempitivo all'interno della maglia e ne mantiene la forma

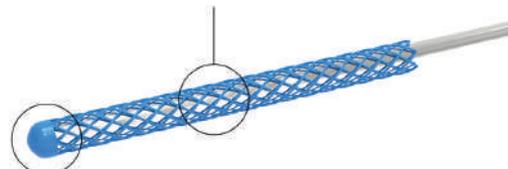

Punta smussata sicura

Danni minimi ai tessuti grazie alla punta a testa rotonda in polimero ad alta densità

SPECIFICHE TECNICHE

	Cannula		Filo
Gauge	Gauge con Mesh	Lunghezza	Lunghezza
21G	18G	40/60mm	35/45mm



FINE MICRO CANNULA

Cannula con punta smussa atraumatica per filler

STERILE EO

Cannula Elettrolitica smussata con foro d'inserione più ampio

La superficie perfettamente smussata aiuta un'inserione più fluida ed indolore




versione precedente

Parete Ultra Sottile

Fornisce un'inserione più fluida e sicura

Parete ultra sottile

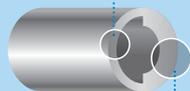

Parete regolare ...

Acciaio Inossidabile di Alta Qualità

Eccellente flessibilità e tenuta



Precisione dell'inserione

Presenza della scala e del punto per una più accurata inserione



Manico in Policarbonato con attacco Luer-Lock

Chiusura più stabile e resistenza alle pressione più alta



18G 70mm	20G 70mm	21G 50mm 21G 70mm	22G 50mm 22G 70mm	23G 50mm	25G 40mm 25G 50mm	27G 25mm 27G 40mm 27G 50mm	30G 25mm

Packaging - Scatola da 24 pezzi

FMS™

FINE MICRO SYRINGE

Fine Micro Syringe STERILE EO

32G Ago a parete ultra sottile

L'ago a parete ultra sottile 32G consente una minore forza di estrusione e si traduce in un'iniezione più fluida

Meno dolore ed emorragia

Parete ultra sottile, bordo tagliente pulito e superficie micro-lucidata dell'ago, che provoca meno dolore, meno emorragia e meno segni di iniezione.

Vari usi



Efficace per l'iniezione di Botox, collagene, acido ialuronico, anestetici locali, mesoterapia e placenta, nonché soluzioni ad alta viscosità.

Volume	Misura	Lunghezza dell'ago
--------	--------	--------------------

0.3ml	32G	8mm 5/16"
-------	-----	-----------

0.5ml	32G	8mm 5/16"
-------	-----	-----------

1.0ml	32G	8mm 5/16"
-------	-----	-----------

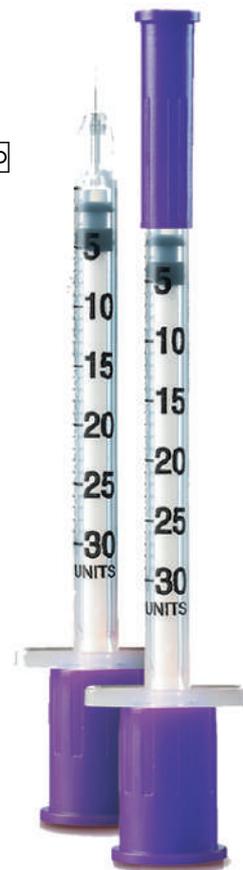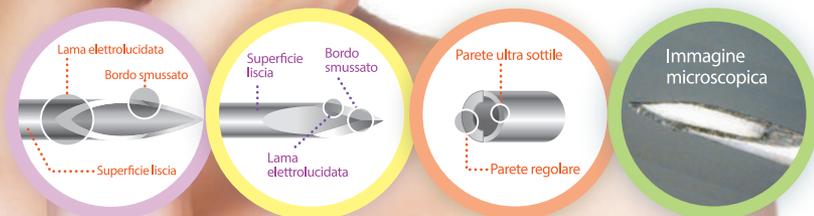

Packaging - Scatola da 100 pezzi





Micro Meso Needles **STERILE EO**

L'integrazione di alta qualità e tecnologia ha creato questo ago ultrasottile per ridurre il disagio del paziente durante le procedure iniettive e per ridurre al minimo emorragia e gonfiore.

CARATTERISTICHE

- 30G, 32G, 33G, 34G
- Ago a parete ultra sottile
- Tecnologia di lucidatura micron
- Riduce al minimo il dolore, il sanguinamento e il gonfiore
- Tempi di inattività minimi
- Segni di iniezione invisibili
- Approvazione FDA e CE

APPLICAZIONI

- Mesoterapia
- Collagene, HA, tossina botulinica, placenta, iniezione di anestesia locale



30G	4mm
	6mm
	8mm
	13mm
32G	4mm
	6mm
	8mm
	13mm
33G	4mm
	6mm
	8mm
34G	13mm
	4mm
	6mm
	8mm
	13mm



Packaging
Scatola da 100 pezzi



Blandice

HYDROGEL FACE MASK

La migliore soluzione per le pelli irritate ed arrossate
dopo qualsiasi trattamento alla pelle



Idratazione a lunga durata

MASCHERA ALL'ACIDO IALURONICO

Migliora la capacità idratante

L'Acido Ialuronico trattiene le molecole d'acqua e mantiene la pelle idratata

- INGREDIENTE CHIAVE

Acido ialuronico
(Ialuronato di sodio 3.000 ppm)



Effetto lenitivo immediato

MASCHERA BETA-GLUCANO

Raffreddamento efficace ed effettivo della pelle

Il Beta Glucan è efficace per lenire la pelle sensibile e danneggiata

- INGREDIENTE CHIAVE

Beta-glucano
(1.400 ppm)

- Per chi vuole lenire la pelle dopo i trattamenti come MTS, Laser, RF frazionata, ecc.
- Per chi ha la pelle secca e ruvida
- Per chi vuole lenire la pelle surriscaldata e arrossata
- Per coloro che si preoccupano della pelle sensibile e problematica

Packaging - Scatola da 4 pezzi



Soluzioni innovative e complete per la medicina estetica

tmedicaldevice.it

